


Starlyf® Spin White

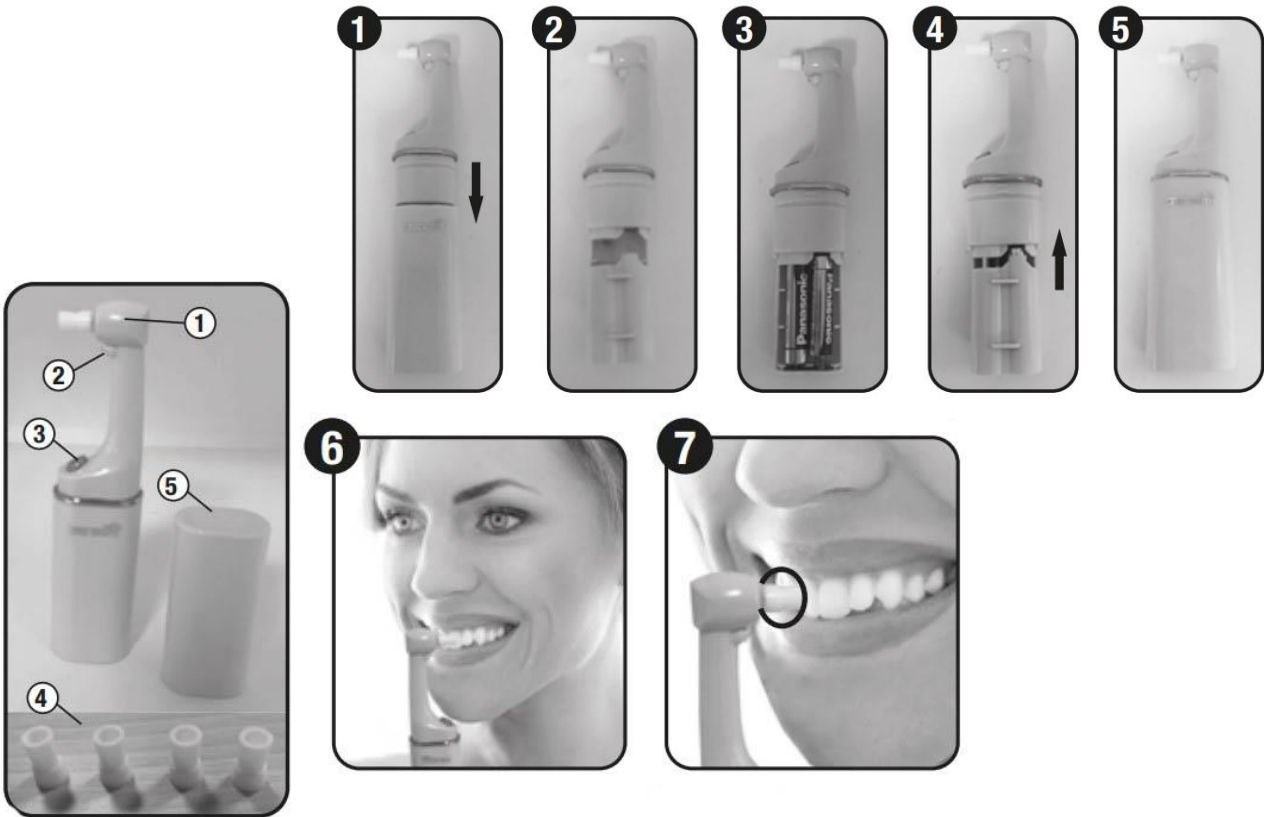

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Starlyf® Spin White, το γυαλιστικό δοντιών με ενσωματωμένο φως LED, που αφαιρεί τους λεκέδες και λευκαίνει τα δόντια, για ένα πιο φωτεινό και όμορφο χαμόγελο.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος, για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενα

1. Προειδοποιήσεις
2. Πληροφορίες για τις μπαταρίες
3. Εξαρτήματα
4. Το σετ περιλαμβάνει
5. Τρόπος χρήσης
6. Καθαρισμός και συντήρηση
7. Εγγύηση ποιότητας

1- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το Starlyf® Spin White σε ευαίσθητα ή κατεστραμμένα δόντια, μπορεί να καταστρέψει το σμάλτο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή, μόνο σε φυσικά δόντια (μην τη χρησιμοποιείτε σε τεχνητά δόντια, οδοντοστοιχίες κ.λπ.).
- Προσέξτε να μην εισάγετε την κεφαλή της συσκευής στο λαιμό.
- Μην πιέζετε την επιφάνεια των δοντιών με δύναμη, θα μπορούσε να προκαλέσει αλλεργίες ή να βλάψει την οδοντίνη.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό και τη στίλβωση της επιφάνειας των δοντιών, με οδοντόκρεμα ή οδοντικό βερνίκι.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Μην το βυθίζετε σε νερό που μπορεί να το καταστρέψει.

- Διατηρείτε το Starlyf® Spin White στεγνό ανά πάσα στιγμή. Μην το αποθηκεύετε σε υγρούς χώρους ή κοντά σε δοχεία με νερό, τα οποία θα μπορούσαν να πέσουν.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες- αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη, παραμόρφωση ή αλλοίωση του προϊόντος.
- Αποφεύγετε τις πτώσεις, τα χτυπήματα και τα ισχυρά χτυπήματα πάνω στην ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Θα μπορούσαν να το σπάσουν ή να το καταστρέψουν.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε/χρησιμοποιήσετε.
- Για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο, κρατήστε το Starlyf® Spin White, χωρίς μπαταρίες όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην το πετάξετε στη φωτιά.
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση της συσκευής, πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά, για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Μην επεμβαίνετε στο προϊόν σε καμία περίπτωση. Ο χειρισμός ή η επισκευή της συσκευής, επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο επαγγελματία.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος δεν υποκαθιστά το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών και τις επισκέψεις στον οδοντίατρο. Συνιστάται να βουρτσίζετε τα δόντια σας τρεις φορές την ημέρα και να επισκέπτεστε τον οδοντίατρο δύο φορές το χρόνο.
- Δεν συνιστάται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται).
- Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, απλές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες λανθασμένα και μην τις πετάτε στη φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να έχουν διαρροή.
- Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην επαναφορτίζετε τις απλές μπαταρίες.
- Φυλάσσετε πάντα τις αχρησιμοποίητες μπαταρίες στη συσκευασία τους και μακριά από μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μπαταρίες.
- Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, πιάστε τη λαβή και τραβήξτε σταθερά τη βάση (βλ. εικόνα 1).
- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA τηρώντας τις ενδείξεις πολικότητας, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και επανατοποθετήστε τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει σωστά (δείτε τις εικόνες 2, 3, 4 και 5).

3- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Κεφάλι (1)
- Ενσωματωμένο φως LED (2)
- Κουμπί On/Off (3)
- Ανταλλακτικές / κεφαλές γυαλίσματος (4)
- Καπάκι ταξιδιού (5)

4- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- 1 Starlyf® Spin White
- 5 αξεσουάρ/συμβουλές γυαλίσματος
- 1 θήκη ταξιδιού

5- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Αφαιρέστε το προστατευτικό και βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή γυαλίσματος των δοντιών είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Η λυχνία LED θα ανάψει.
- Το Starlyf® Spin White έχει δύο ταχύτητες γυαλίσματος: αργή και γρήγορη. Χρησιμοποιήστε, αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.
- Πατώντας το κουμπί on/off μία φορά, θα λειτουργήσει η αργή ταχύτητα. Πατώντας το δύο φορές, θα λειτουργήσει η γρήγορη ταχύτητα.
- Πιέστε απαλά την άκρη της κεφαλής, πάνω στις περιοχές που θέλετε να γυαλίσετε (βλ. εικόνα 6).
- Αφήστε την κεφαλή να δράσει σε κάθε περιοχή, για λίγα δευτερόλεπτα (βλ. εικόνα 7).
- Πατήστε το κουμπί on/off, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας ή γυαλιστικού για καλύτερα αποτελέσματα. Προσθέστε το στην άκρη του κεφαλής, πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα γυαλίσματος / κεφαλές όταν δεν γυαλίζουν ή δεν λευκαίνουν σωστά τα δόντια ή όταν παραμορφώνονται από τη χρήση. Για να τις αλλάξετε, απλώς τραβήξτε την κεφαλή προς τα έξω και αντικαταστήστε τη με μια άλλη που περιλαμβάνεται στο σετ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Λειτουργία ασφαλείας: Η περιστροφή της κεφαλής θα σταματήσει, εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί. Αφαιρέστε την κεφαλή και ξεπλύνετε με νερό. Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό.

Μην ξεπλένετε τη μονάδα με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τη βυθίζετε σε νερό.

Αποθηκεύστε τη μονάδα και τα εξαρτήματα σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή χρήση, αμελή εμπορική χρήση, μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό.

Η οδηγία A.H.H.E. απαιτεί όλα τα παλιά ή ελαττωματικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, να απορρίπτονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό στην περιοχή σας για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο κέντρο συλλογής.

Κατασκευασμένο στην Κίνα