
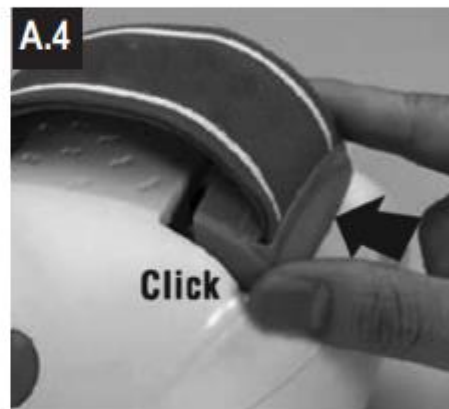
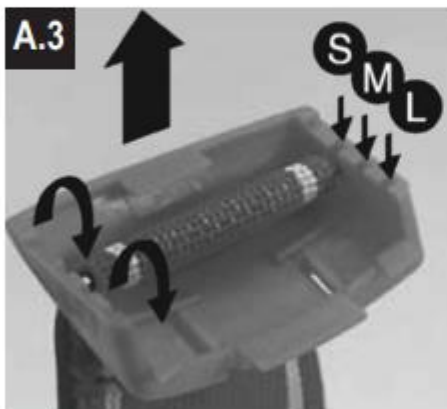
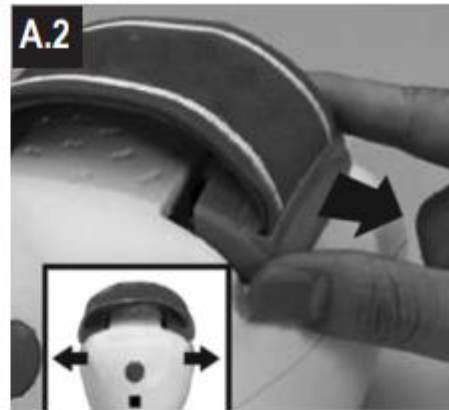


# VELFORM® Cellu Solution

## Οδηγίες Χρήσης

**A**

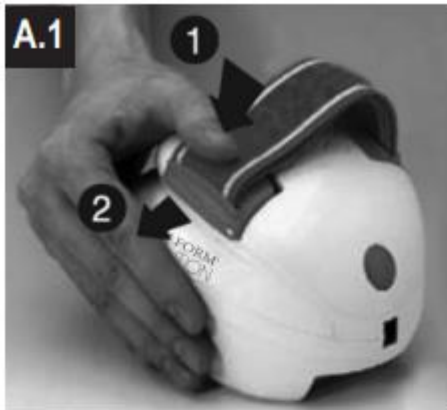

**A.5**





**B**



**e**



**f**

**g**



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το VELFORM® Cellu Solution, το επαγγελματικό μασάζ 3 σε 1 κατά της κυτταρίτιδας, που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την εμφάνιση της κυτταρίτιδας και της χαλάρωσης και να μειώνει την κατακράτηση υγρών. Αυτό το νέο σύστημα μασάζ με αναρρόφηση, έχει αναπτυχθεί ειδικά για να λειτουργεί σε περιοχές που είναι επιρρεπείς στην κυτταρίτιδα, όπως οι μηροί, οι γλουτοί και οι γοφοί, διεγείροντας και κάνοντας μασάζ στο λεμφικό σύστημα, ενώ παράλληλα κινητοποιεί τα περιττά σωματικά υγρά, ώστε να απομακρύνονται με φυσικό τρόπο. Συνιστούμε την αρχική χρήση της συσκευής VELFORM® Cellu Solution για 15 λεπτά κάθε μέρα. Όταν παρατηρήσετε ορατά αποτελέσματα, η θεραπεία μπορεί να μειωθεί σε περίπου τρεις φορές την εβδομάδα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:**

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ
5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** - Μην χρησιμοποιείτε το VELFORM® Cellu Solution, εάν είστε έγκυος ή έχετε καρδιακά προβλήματα ή σωματικό τραυματισμό.

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχετε κάποιο εμφύτευμα στο σώμα σας, όπως βηματοδότη, σπιράλ ή βίδες.

- Φυλάσσετε το VELFORM® Cellu Solution μακριά από παιδιά.

- Μην χρησιμοποιείτε το VELFORM® Cellu Solution, εάν πάσχετε από θρόμβωση ή λαμβάνετε ιατρική θεραπεία.

Μην χρησιμοποιείτε το VELFORM® Cellu Solution, μία ώρα πριν ή μετά τα γεύματα.

- Εάν υποφέρετε από σοβαρή ασθένεια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το VELFORM® Cellu Solution.

- Μην χρησιμοποιείτε το VELFORM® Cellu Solution, κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.

- Σταματήστε αμέσως τη χρήση, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσφορία.

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, μετά από κάθε χρήση.

- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε, το VELFORM® Cellu Solution.

- Το VELFORM® Cellu Solution, δεν είναι ιατρική ή θεραπευτική συσκευή.

- Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με κόκκινο ή φλεγμονώδες δέρμα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερα από πέντε λεπτά στην ίδια περιοχή του σώματος.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν πάτε για ύπνο, επειδή το μασάζ μπορεί να έχει διεγερτική δράση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ ξαπλώνετε στο κρεβάτι.

- Αυτή η συσκευή δεν συνιστάται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν πείρα και δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

## 2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συνιστούμε τη χρήση του VELFORM® Cellu Solution με κρέμες σύσφιξης και κατά της κυτταρίτιδας, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κάνουν τη συσκευή να γλιστράει πιο εύκολα στο δέρμα, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε καλύτερα στις περιοχές θεραπείας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Βεβαιωθείτε ότι η κρέμα έχει απορροφηθεί πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το VELFORM® Cellu Solution και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κρέμας, που θα μπορούσαν να φράξουν το VELFORM® Cellu Solution.

Μην σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το VELFORM® Cellu Solution. Εάν σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε, το σώμα σας μπορεί να αρχίσει να κατακρατεί ξανά υγρά και η κυτταρίτιδα μπορεί να επανέλθει.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το νέο σύστημα μασάζ αναρρόφησης VELFORM® Cellu Solution 3 σε 1 λειτουργεί ως εξής: Ο μπροστινός κύλινδρος με τις μαλακές ραβδώσεις (1) τραβάει απαλά το δέρμα και το οδηγεί στη μονάδα αναρρόφησης (2). Η μονάδα αναρρόφησης ανασηκώνει το δέρμα για να φτάσει πιο αποτελεσματικά στο στρώμα της κυτταρίτιδας. Αυτό το μασάζ βαθιάς διείσδυσης, διεγείρει το λεμφικό σύστημα και βοηθά στην απομάκρυνση των περιττών υγρών, που είναι η κύρια αιτία της κυτταρίτιδας. Ο πίσω κύλινδρος (3) λειαίνει απαλά το δέρμα ξανά. Η πρόσθετη λειτουργία δόνησης (4) εντείνει το αποτέλεσμα του μασάζ βαθιάς διείσδυσης.

### Χρήση της συσκευής

Συνδέστε το μετασηματιστή στην πρίζα και συνδέστε το καλώδιο στο μπροστινό μέρος της συσκευής VELFORM® Cellu Solution. Κρατήστε τη συσκευή γλιστρώντας το χέρι σας κάτω από τον ιμάντα, προς το μοβ κουμπί STOP και το καλώδιο.

#### (α) Ρύθμιση του ιμάντα

Ο ιμάντας χειρός μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής για να ταιριάζει σε κάθε μέγεθος χεριού: πιέστε τη ραβδωτή επιφάνεια του μοβ κουμπώματος κάτω από τον ιμάντα και σύρετε το κούμπωμα μακριά από τη μονάδα. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το κούμπωμα του ιμάντα σε μία από τις τρεις θέσεις υποδοχής (S / M / L). Ο ιμάντας μπορεί να ρυθμιστεί και στις δύο πλευρές της μονάδας.

S = Small, M = Medium και L = Large.

Αφού ρυθμίσετε τον ιμάντα, σύρετε το μοβ κούμπωμα πίσω στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Διακόπτης ON/OFF με ρυθμίσεις προγράμματος

ON/OFF

ΘΕΣΗ

Για να γίνουν πιο κατανοητές αυτές οι οδηγίες, τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά σας έτσι ώστε να κοιτάτε το πίσω μέρος της μονάδας, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Στην κάτω δεξιά πλευρά βρίσκεται ο διακόπτης ON/OFF (O), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τις λειτουργίες του συστήματος VELFORM® Cellu Solution (1, 2, 3).

Στο κέντρο της μονάδας υπάρχουν τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες, οι οποίες υποδεικνύουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος.

#### ΘΕΣΗ (0)

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και λειτουργεί.

#### ΘΕΣΗ (1)

Αυτή η πρώτη θέση ενεργοποιεί τον κύλινδρο με τις μαλακές ραβδώσεις, ο οποίος βοηθά στο απαλό τράβηγμα του δέρματος (σε αυτή τη ρύθμιση, η κόκκινη και η πράσινη λυχνία πρέπει να είναι αναμμένες).

#### ΘΕΣΗ (2)

Αυτή η ρύθμιση εκκινεί τη λειτουργία αναρρόφησης της μονάδας, ενώ ο κύλινδρος με τις μαλακές ραβδώσεις κινείται προς τα εμπρός.

Η ένταση αναρρόφησης (χαμηλή - υψηλή) μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί ελέγχου αναρρόφησης στην κάτω αριστερή πλευρά της μονάδας (σε αυτή τη ρύθμιση, η κόκκινη και οι δύο πράσινες λυχνίες πρέπει να είναι αναμμένες).

#### ΘΕΣΗ (3)

Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί πρόσθετη λειτουργία δόνησης για βαθύτερο και ακόμη πιο ευχάριστο μασάζ (σε αυτή τη ρύθμιση, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι αναμμένες).

(b) Μεταβλητός έλεγχος της έντασης αναρρόφησης

(e) Μεταβλητός έλεγχος της έντασης αναρρόφησης

Το κουμπί ελέγχου της ρυθμιζόμενης έντασης αναρρόφησης βρίσκεται στην κάτω αριστερή πλευρά της συσκευής. Κατά τη λειτουργία της συσκευής VELFORM® Cellu Solution, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση αναρρόφησης από Χαμηλή σε Υψηλή ένταση αναρρόφησης (διαθέσιμη μόνο στις θέσεις 2 και 3).

Σημείωση: Πάντα να ξεκινάτε τη θεραπεία σας στη ρύθμιση Χαμηλής (Low) έντασης αναρρόφησης. Αφού συνηθίσετε τη συσκευή και τη θεραπεία, μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά την ένταση, στρέφοντας απλώς το κουμπί προς τη ρύθμιση Υψηλή (High).

#### (f) ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟΠ

Μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία αναρρόφησης και την κίνηση προς τα εμπρός του μαλακού ραβδωτού κυλίνδρου ανά πάσα στιγμή, πατώντας το μωβ κουμπί Stop. Όταν απελευθερωθεί το κουμπί Stop, η λειτουργία αναρρόφησης θα ξεκινήσει ξανά.

(g) Σύνδεση του VELFORM® Cellu Solution στο μετασχηματιστή

(g) Σύνδεση για το καλώδιο του μετασχηματιστή

Συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα και συνδέστε το καλώδιο στη συσκευή, όπως φαίνεται παραπάνω. Όταν ανάψει το κόκκινο φως, η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση.

#### 4. Το πρόγραμμα 4 βημάτων για καλύτερα αποτελέσματα

Συνιστούμε τη χρήση του VELFORM® Cellu Solution με συσφικτική και κατά της κυτταρίτιδας κρέμας, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Κάνουν τη συσκευή να γλιστράει ευκολότερα σε λεία επιδερμίδα, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε στις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπίζονται καλύτερα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε, ότι η κρέμα έχει απορροφηθεί πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το

VELFORM®Cellu Solution και ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κρέμας που θα μπορούσαν να φράξουν το VELFORM®Cellu Solution.

Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα και τα μακριά μαλλιά δεν πιάνονται στους κυλίνδρους.

#### **ΒΗΜΑ 1**

Καθίστε σε μια άνετη θέση για τη θεραπεία μασάζ και τοποθετήστε τη μονάδα απαλά στο δέρμα σας. Κάντε πάντα μασάζ προς την κατεύθυνση της καρδιάς σας (από τα γόνατα προς τους γοφούς και τους γλουτούς σας).

Τώρα ενεργοποιήστε τη μονάδα και ξεκινήστε το μασάζ σας στη ΘΕΣΗ 1.

Αυτή η θέση ξεκινά την κίνηση του μαλακού ραβδωτού κυλίνδρου, ο οποίος τραβάει απαλά το δέρμα και το οδηγεί στην περιοχή αναρρόφησης.

#### **ΒΗΜΑ 2**

Αυτή η ρύθμιση ξεκινά τη λειτουργία αναρρόφησης του μασάζ. Ξεκινάτε πάντα με μια ρύθμιση χαμηλής αναρρόφησης (Low). Ο κινητήρας του κυλίνδρου κινεί τη μονάδα με τη βέλτιστη ταχύτητα.

Τώρα μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά την ένταση της αναρρόφησης, για να βρείτε την πιο άνετη ρύθμιση μασάζ για εσάς.

Πατήστε το κουμπί STOP εάν αισθάνεστε ότι η αναρρόφηση είναι πολύ δυνατή.

#### **ΒΗΜΑ 3**

Ο απαλός ραβδωτός κύλινδρος προσφέρει στο δέρμα ένα άνετο μασάζ σε όλο το σώμα, μέχρι τα στρώματα της κυτταρίτιδας.

#### **ΒΗΜΑ 4**

Αυτή η ρύθμιση, ξεκινά τη λειτουργία δόνησης για ένα ακόμη πιο βαθύ και ευχάριστο μασάζ. Μετά τη θεραπεία μασάζ, σας προτείνουμε να εφαρμόσετε την κρέμα ή τη λοσιόν σώματος της επιλογής σας.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Σκουπίστε τη συσκευή μασάζ με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα για να την καθαρίσετε. Το καντράν σκουπίζεται εύκολα.

Ο μάντας χεριού, μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό.

#### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

Το σετ περιλαμβάνει:

- Κύρια μονάδα VELFORM® Cellu Solution
- Μετασχηματιστή
- Εγχειρίδιο οδηγιών

#### **Εγγύηση ποιότητας:**

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή χρήση, αμελή εμπορική χρήση, μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ**

Για την προστασία του περιβάλλοντος, εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή ή/και τον προσαρμογέα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι την πετάτε σε ειδικό δοχείο για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΕΙΣΟΔΟΣ 100-240 V

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 50/60 Hz 0,35 A

ΕΞΟΔΟΣ: DC 9 V 1,0 A

ΜΕ VDE PLUG

ΑΝΑΦ. ΛΟΓΙΚΗ: VCSVFCIND0225

Αυτή η συσκευή έχει διπλή μόνωση. Επομένως, δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης. Ελέγχετε πάντα ότι, η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθείτε και να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους προϊόντος.

Μην πετάτε αυτό το προϊόν όπως θα κάνατε με άλλα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς κανονισμούς.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή/και στην ανθρώπινη υγεία και θα πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά.

Κατασκευασμένο στην Κίνα